


Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a folosi produsul

Funcții telecomandă

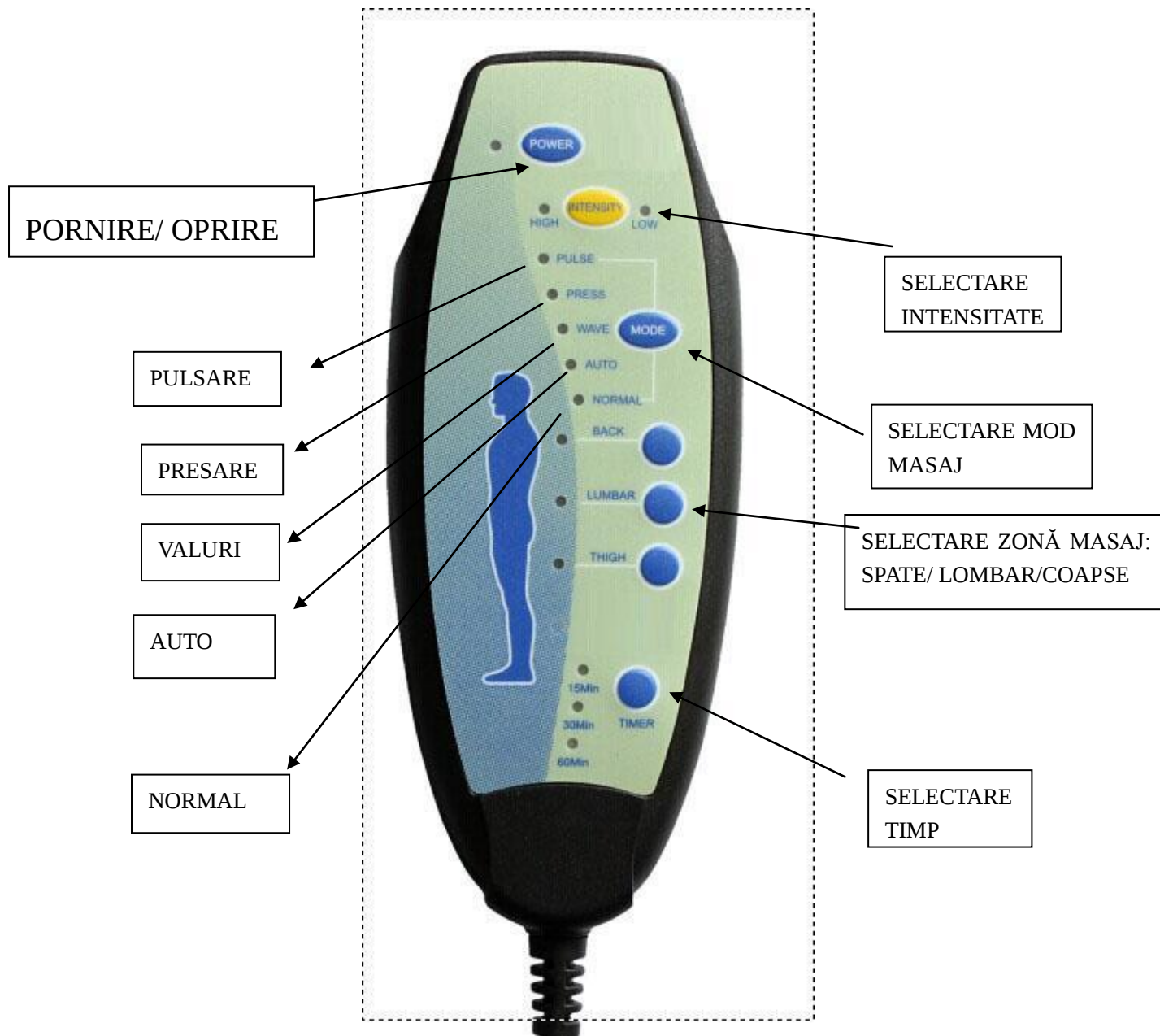

Instrucțiuni de folosire

1. Conectați adaptorul în mufa aflată în spatele pernei de masaj, după care introduceți adaptorul în priză. (vezi figura A)



2. Apăsați butonul **POWER** pentru pornire. Ledul luminează în momentul în care s-a aprins.
3. Activați sistemul de masaj apăsând butoanele **BACK, LUMBAR, THIGH**. Ledul aprins vă indică zona activă. Pentru a opri o zonă, apăsați butonul din nou.
4. Pentru a selecta modul de masaj, apăsați întâi butonul **MODE**. Pentru a selecta modul dorit apăsați butonul până când ledul vă indică modul selectat.
 - PULSE---** masaj adânc pulsant
 - PRESS---** masaj rapid
 - WAVE----** masaj gradual, vibrant
 - AUTO---** masaj aleatoriu incluzând toate zonele de masaj
 - NORMAL---** masaj ferm, vibrant
5. Pentru a schimba intensitatea apăsați butonul **INTENSITY**. Ledul pentru intensitate mare (**HIGH**) sau mică (**LOW**) se va aprinde.
6. Atenție: Opriți imediat folosirea sistemului în cazul în care simțiți orice disconfort sau durere.
7. Atenție: Pentru confortul dumneavoastră, sistemul de masaj este echipat cu o funcție de oprire automata după o folosire continuă de 25 minute.
8. Nu folosiți continuu sistemul mai mult de 25 minute.

Instrucțiuni de siguranță

În momentul în care folosiți un dispozitiv electric, este important să respectați următoarele măsuri de siguranță:

1. Produsul acesta este destinat folosirii la un circuit de 12V. Asigurați-vă că produsul este conectat la o priză corespunzătoare.
2. Întotdeauna deconectați mufa în momentul în care produsul nu mai este folosit, precum și în momentul curățării lui.
3. În cazul în care telecomanda a căzut în apă, întrerupeți alimentarea.
4. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce este în funcțiune. Deconectați produsul în cazul în care doriți să-l dezamblați.
5. A nu se folosi în exterior.
6. A nu se folosi cablul de alimentare pentru a deplasa produsul.

7. Feriți cablul de alimentare de orice sursă de căldură.
8. Produsul trebuie să fie supravegheat în cazul în care este folosit în preajma copiilor sau persoanelor cu dizabilități.
9. Acest produs nu este o jucărie. Copii nu ar trebui să-l folosească, nici să se joace cu el.
10. Nu folosiți produsul în preajma produselor care pulverizează (spray) sau în momentul în care se administrează oxygen.
11. Nu utilizați produsul în apropierea ochilor sau a unor zone sensibile.
12. Pentru a-l scoate din funcțiune apăsați butonul POWER în poziția OFF, asigurați-vă că toate funcțiile au fost oprite, după care întrerupeți alimentarea.
13. Folosiți dispozitivul numai pentru scopul descris în acest manual. Nu folosiți alte anexe, care nu au fost puse la dispoziție împreună cu acest dispozitiv.

Măsuri de sănătate

1. În cazul în care aveți nelămuriri referitoare la sănătatea dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul în prealabil.
2. Persoanele cu stimulator cardiac nu ar trebui să folosească acest dispozitiv.
3. În cazul în care aveți dureri musculare sau la încheieturi încetați utilizare produsului și consultați medicul dumneavoastră. Durerile acestea pot fi cauza unei stări mai grave.

Instrucțiuni de păstrare și întreținere

Pentru păstrare:

1. Păstrați dispozitivul în cutie sau într-un loc ferit de umezeală și căldură.
2. A se evita contactul cu lucruri ascuțite, care ar putea să perforzeze materialul.
3. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul telecomenzii.
4. Nu agățați telecomanda utilizând cablul de alimentare.

Pentru curățare:

1. Asigurați-vă că produsul este deconectat de la sursa de alimentare și este răcit înainte de a fi curățat.
2. A nu se utiliza lichide pentru curățarea produsul. A se curăța cu un burete umezit, utilizând detergent sau spumă. Ștergeți ușor cu o cârpă uscată.
3. A nu se folosi detergenți abrazivi, perii, gazolină, kerosen, detergenți pentru curățarea geamurilor/mobilei, solvenți, diluați sau apă fiartă pentru a curate produsul.